




Il mobile «4.0» nello studio dentistico



CHI E'

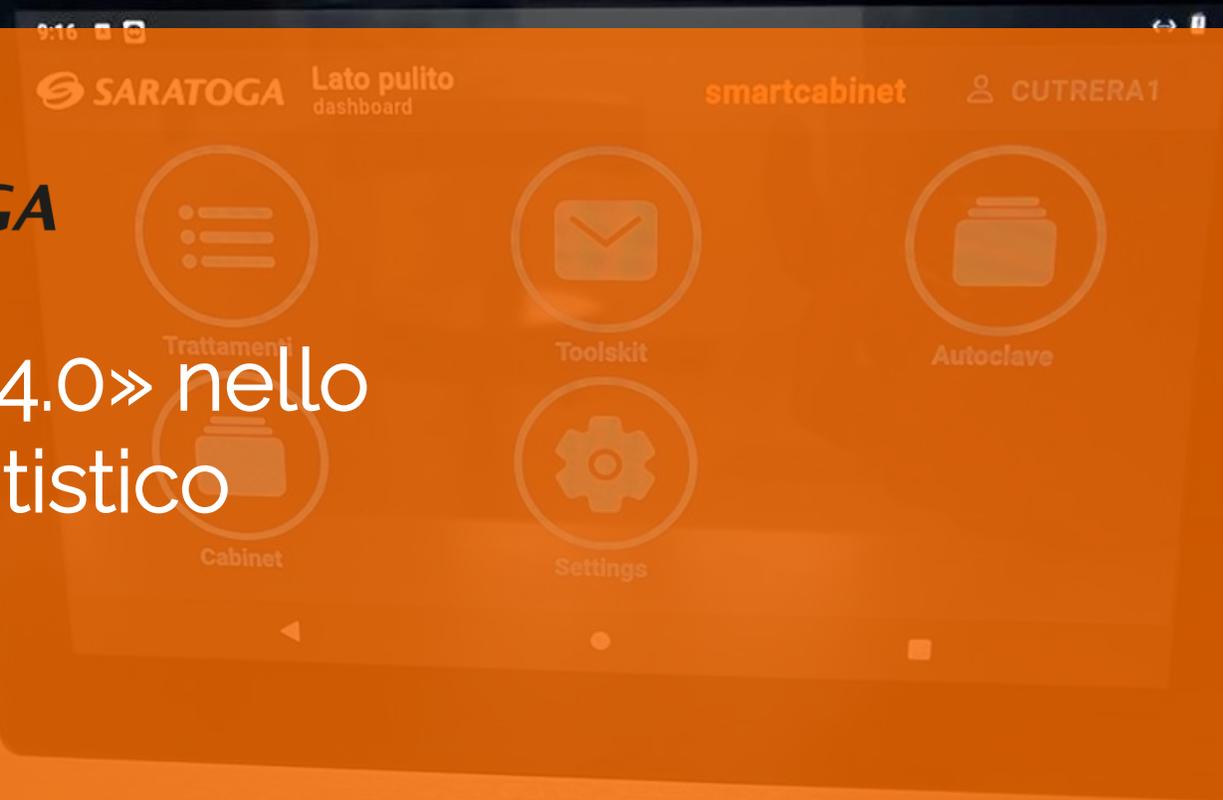

Una società all'avanguardia nel settore dentale nella produzione di **arredi professionali** per dentisti e odontotecnici, in Italia ed in tutto il mondo, da oltre **45 anni**.

Siamo la prima azienda in Italia ad aver ottenuto la certificazione «4.0» per l'arredamento dello studio odontoiatrico



Cosa facciamo



1 Studio

Arredi professionali per
cliniche odontoiatriche e
sale di sterilizzazione



2 Laboratorio

Banchi da lavoro per
laboratori
odontotecnici



3 Educational

Simulatori odontoiatrici e
modelli dentali per
l'educazione

Il mobile 4.0

Saratoga ha ottenuto a ottobre 2021 la certificazione del Polo Tecnologico Alto Adriatico che attesta le linee di mobili «SIGN» e di sterilizzazione «STE» come «4.0»

Cosa **implica**?

Che chi acquista uno di questi mobili entro il 31/12/2022 può beneficiare del **credito di imposta**.

Ma non **solo**!

Acquistare un mobile «4.0» non significa unicamente un **risparmio economico** ma anche e soprattutto un **risparmio di tempo** grazie ad una rinnovata organizzazione della clinica.



LA NOSTRA **PROPOSTA**



Coniugare i 3 pilastri fondamentali dello studio dentistico: **ergonomia**, **igiene** ed **organizzazione**. Con le nostre soluzioni 4.0 ci impegnamo a realizzare ambienti innovativi per migliorare il benessere delle persone.

I benefici del mobile 4.0



- ✓ Lo strumento giusto, al posto giusto, al momento giusto.
- ✓ Miglioramento della gestione del tempo grazie alla riduzione dei tempi morti
- ✓ Ottimizzazione del workflow
- ✓ Supporto alla formazione del nuovo personale
- ✓ Ausilio nella standardizzazione dei protocolli clinici

I benefici del mobile 4.0



Il tutto grazie a:

- L'identificazione dei kit strumenti
- L'individuazione del cassetto in cui vengono posizionati
- Un'interfaccia utente semplice ed intuitiva

In cosa consiste il mobile 4.0 di **SARATOGA**



Il mobile 4.0 di Saratoga è dotato di un software sviluppato per far fronte alle sfide quotidiane relative alla **movimentazione** ed alla **tracciabilità** degli strumenti nello studio dentistico.




Grazie alla tecnologia **RFID**, il sistema traccia le buste con gli strumenti dal momento della loro creazione fino all'utilizzo, consentendo all'ASO di sapere in ogni momento dove si trovano.



Ad ogni trattamento vengono associati uno o più kit: questo consente una **maggior efficienza** nella preparazione dell'appuntamento ed una **maggior concentrazione** sul paziente da parte dello staff, rispondendo così anche ai sempre crescenti requisiti in materia di **sicurezza** e di **infection control**.

Il nostro sistema prevede l'installazione di **un kit 4.0**
in ogni sala operativa inclusa la sterilizzazione

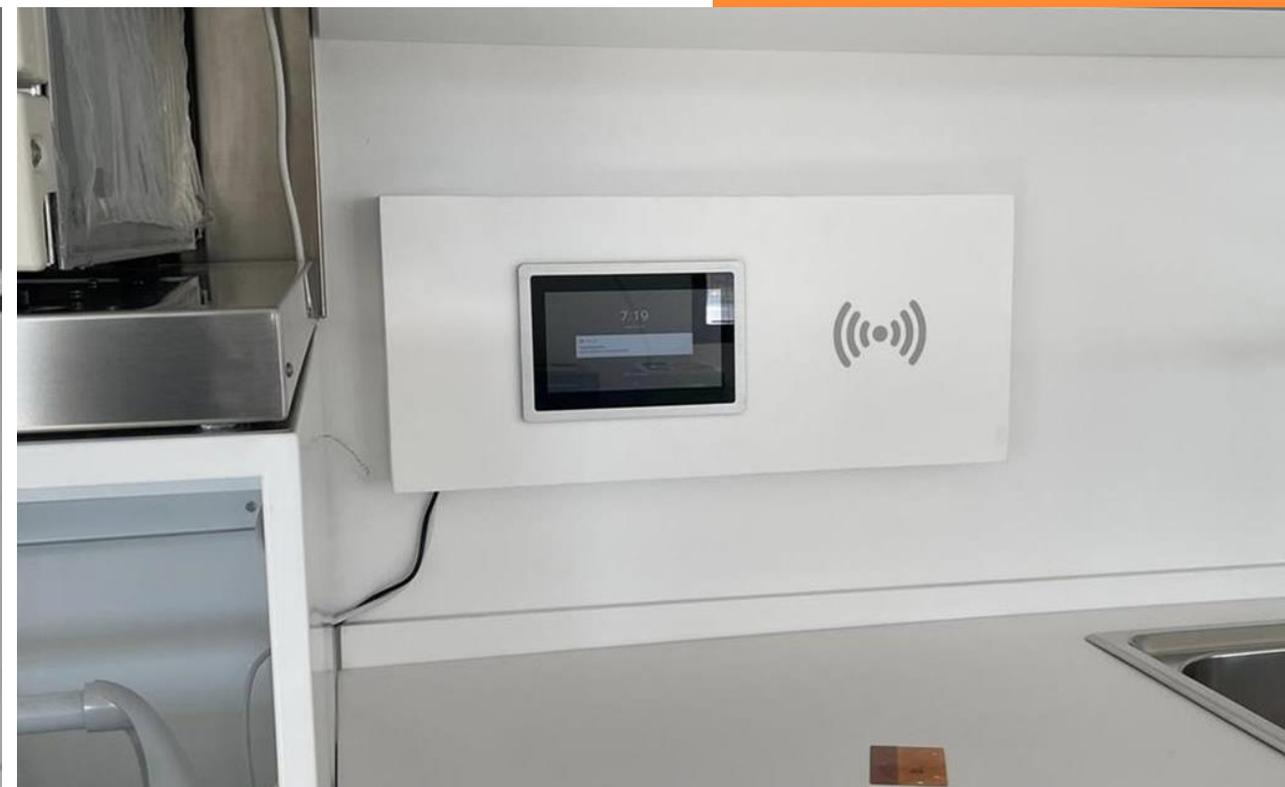

Questi 2 accessori costituiscono **parte integrante** del sistema:



Tag RFID(25 pz per busta)

Badge per un login ancora più rapido



COME FUNZIONA: **IL SET UP**




TRACCIAMENTO

Il sistema traccia quello che conosce!



LIBRERIA

Caricamento a sistema della «libreria» degli strumenti e dei kit utilizzati e dei trattamenti che vengono normalmente effettuati in clinica

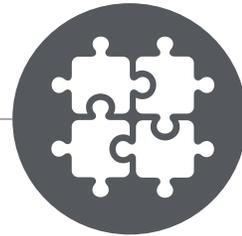

KIT

Ogni trattamento prevede una serie di kit che vengono associati «a priori» al trattamento stesso



STRUMENTI

Per ogni tipologia di strumento è possibile inserirne la quantità per avere l'inventario.

IN STERILIZZAZIONE **TRACCIARE LE BUSTE**

- Inserisco il «tag» all'interno della busta
- Metto la busta in autoclave (è possibile impostare la durata del ciclo di sterilizzazione)
- Sposto la busta nel mobile 4.0



Scelgo in quale cassetto inserire la busta



Passo la busta sul lettore RFID



LA GESTIONE DEGLI **APPUNTAMENTI/TRATTAMENTI**

- La preparazione della sala può essere gestita tramite
 - appuntamento (previo inserimento dello stesso a sistema)
 - trattamento (ricerca diretta)
- Ogni clinica potrà decidere se inserire o meno l'agenda a sistema



IL MOBILE 4.0

Richiamando il tipo di trattamento da eseguire, il mobile 4.0 indica alla ASO tutte le buste da preparare e la loro collocazione all'interno del mobile

Il sistema permette di localizzare rapidamente eventuali buste-extra richieste dall'odontoiatra durante il trattamento al fine di evitare tempi morti.

Prima di aprirla, l'operatore farà il check out della busta passandola sul lettore RFID. Automaticamente il sistema annullerà l'associazione tag-busta e considererà gli strumenti come «usati» e quindi da sterilizzare nuovamente.

Il tag potrà essere utilizzato per la creazione di nuove buste

IL MOBILE 4.0

Altre funzionalità



È possibile spostare la busta da un mobile ad un altro prelevandola e passandola direttamente su RFID del mobile di destinazione



Una notifica impostata 5 giorni prima della scadenza delle buste consentirà di evitare frequenti controlli manuali e ulteriori perdite di tempo



Il sistema agevola l'inserimento delle ASO neoassunte, guidandole nell'apprendimento dei protocolli vigenti in clinica



Attraverso il sistema è possibile rilevare dati statistici per fare considerazioni sulla gestione della clinica.



Per maggiori informazioni puoi scrivere un'e-mail a info@saratogadental.it indicando «4.0» nell'oggetto o telefonarci allo 0434572600

